

EXAMVISION™



Félicitations pour l'acquisition
de vos loupes sur-mesures



Sommaire

Préambule	3
Contrôle qualité, réglages et tutos-videos	
Les Galilée HD et Essential	4
Kepler Kompakt	6
Kepler Advanced	8
Garantie	10
Les accessoires ExamVision	11
Symboles et instructions pour une utilisation appropriée	14



Préambule

Vous avez choisi un outil de haute précision, fait à vos mesures. Si vos loupes nécessitent un ajustement, souvenez-vous que leur précision est complexe. Aussi, nous vous invitons à suivre le tuto de mise en main avec une attention toute particulière. Vous pourrez aussi vous rapprocher de votre distributeur ExamVision pour vous faire assister.

Vos loupes ont été fabriquées avec le plus grand soin, précisément à vos mesures. Nous espérons que vous en serez totalement satisfait.





Contrôle qualité, réglages et tutos-videos



Les Galilée HD et Essential

Avant de commencer à travailler avec vos loupes, nous vous invitons à regarder les tutos Examvision. Nous avons intégré à vos loupes la distance de travail que vous souhaitez, mesurée depuis le devant de votre oeil jusqu'au champ de vision choisi. Cette distance est spécifiée sur le Certificat de Qualité attaché à vos loupes.

Regardez bien le tuto *"Vos loupes sont-elles correctement ajustées?"* pour une vision nette et optimale, et le parfait ajustement à votre visage, garanti par le placement des loupes à la bonne hauteur et par la bonne angulation des télescopes, comme illustré ci-après :

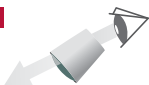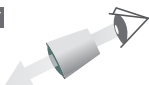

Tutos - Videos

Vous trouverez les tutos ExamVision sur notre chaine YouTube et sur Vimeo. Pour les regarder maintenant, scannez le QR code ci-contre :





Contrôle qualité, réglages et tutos-videos



Kepler Kompakt

Avant de commencer à travailler avec vos loupes, nous vous invitons à regarder les tutos Examvision. Nous avons intégré à vos loupes la distance de travail que vous souhaitez, mesurée depuis le devant de votre oeil jusqu'au champ de vision choisi. Cette distance est spécifiée sur le Certificat de Qualité attaché à vos loupes.

Vous devez régler la netteté de vos Kepler Kompakt oeil par oeil et à la distance de travail convenue. Une fois cette mise au point optimisée, fixez-là grâce à la clé Allen jointe à vos loupes. Regardez la video "**Loupes ExamVision - Réglage des loupes Kepler Kompakt**" pour une vision nette et optimale, et le parfait ajustement à votre visage, garantis par le placement des loupes à la bonne hauteur et par la bonne angulation des télescopes, comme illustré ci-après :



Tutos - Videos

Vous trouverez les tutos ExamVision sur notre chaine YouTube et sur Vimeo. Pour les regarder maintenant, scannez le QR code ci-contre :





Contrôle qualité, réglages et tutos-videos



Kepler Advanced

Avant de commencer à travailler avec vos loupes, nous vous invitons à regarder les tutos Examvision. Nous avons intégré à vos loupes la distance de travail que vous souhaitez, mesurée depuis le devant de votre oeil jusqu'au champ de vision choisi. Cette distance est spécifiée sur le Certificat de Qualité attaché à vos loupes.

Vous devez régler la netteté de vos Kepler Kompakt oeil par oeil et à la distance de travail convenue. Merci de visionner la video *"Fitting your Kepler Advanced loupes"* pour une vision nette et optimale, et le parfait ajustement à votre visage, garantis par le placement des loupes à la bonne hauteur et par la bonne angulation des télescopes, comme illustré ci-après:



Tutos - Videos

Vous trouverez les tutos ExamVision sur notre chaine YouTube et sur Vimeo. Pour les regarder maintenant, scannez le QR code ci-contre :



Garantie

Garantie 5 ans par le fabricant

- Galilée HD
- Kepler Kompakt
- Kepler Advanced
- Essential

Merci de noter que notre garantie ne couvre pas les défauts causés par l'usure normale, une mauvaise utilisation, la négligence, les dommages accidentels, les modifications, l'expédition dans un emballage qui n'est pas celui d'origine, ou les défauts dûs à un montage, un entretien, une utilisation ou des procédures de nettoyage inappropriés.

En cas de dysfonctionnement, veuillez retourner les loupes à votre revendeur ExamVision pour réparation.

Pour en savoir plus, merci de vous consulter :
examvision.com/warranty



Les accessoires ExamVision



Soutiens nasaux

Soutiens nasaux en silicone transparent dans différentes tailles.



Cordon de serrage

Cordon au toucher agréable, résistant, pour une sécurité supplémentaire lorsque vous portez vos loupes. Fixé aux loupes par des attaches en silicone.



Attache-câble

Fixez les attache-câble sur les branches de vos loupes et insérez-y délicatement le câble de la led.



Solution nettoyante (sans alcool)

Notre solution nettoyante vous permettra de maintenir vos loupes en parfait état. Pulvérisez-en une petite quantité sur un chiffon microfibre, afin de retirer les saletés, poussières et taches de graisse.

Les accessoires ExamVision



Les lingettes désinfectantes (sans alcool)

Nos lingettes désinfectantes vous permettront de maintenir vos loupes en parfait état. Ces lingettes nettoyantes jetables sont un moyen rapide et facile d'éliminer en toute sécurité la saleté, la poussière et la graisse.



Visionshield (taille L, XL et MAX)

Elle protège vos loupes et votre visage des éclaboussures et de la saleté. Elle se fixe facilement aux loupes ExamVision à l'aide d'un adaptateur Velcro. La taille L convient aux loupes Galilean HD et Essential - et la taille XL convient aux loupes Kepler. Ces versions ont une découpe dans la visière pour une lampe frontale. La Visionshield MAX couvre la totalité du visage. Elle se fixe facilement et s'adapte à n'importe quelle loupe ExamVision. Elle convient à tous les gestes du quotidien. Les Visionshields d'ExamVision sont fabriqués à partir d'un film plastique flexible, qui ne se fend pas, et qui peut être facilement nettoyé, désinfecté et réutilisé.



Sideshields

Presque invisibles, et très légères, ces protections latérales protègent les yeux des éclaboussures et autres projectiles. Jetables, commercialisées par lot de 3.



Bijoux

Si vous souhaitez aller encore plus loin dans la personnalisation de vos loupes, pourquoi ne pas y ajouter un diamant ? Un diamant de 0.02 carat (1.7 mm) serti dans un support en argent massif, taillé à la main par un créateur de bijoux danois. Pour mettre en valeur votre belle monture Icon. Des rubis et des saphirs sont également disponibles. Pendant que nous occupons de concevoir la perfection pour vos loupes, vous, vous les personnalisez.



Embouts de branche colorés

Embouts de branche anti-allergiques qui personnalisent vos loupes et les rendent toujours plus confortables. En caoutchouc artificiel. Disponibles dans une large palette de couleurs.

Vous pouvez consulter la liste de tous les accessoires disponibles sur :
examvision.com/loupes-lights/accessories/



Symboles et instructions pour une utilisation appropriée



Fabricant

ExamVision ApS. Industrivej 11, 8305 Samsø. Denmark.
www.examvision.com



eRFU indicator

Consulter les instructions d'utilisation

Pour les versions digitales en différentes langues,
merci de cliquer sur le lien : examvision.com/support



Attention. Pour une utilisation et l'entretien appropriés de vos lunettes

Vos lunettes ExamVision sont un instrument de précision. Comme pour tout produit de qualité, un entretien approprié est nécessaire à maintenir vos lunettes en parfait état. Dans le cadre d'un usage quotidien, vos lunettes doivent être contrôlées de temps en temps. Inspectez-les régulièrement. Si vous remarquez de l'usure ou des avaries, si vos lunettes sont lâches ou ne s'adaptent plus aussi bien à votre visage qu'à l'état neuf, cessez de les utiliser et contactez immédiatement votre revendeur ExamVision pour un nouveau réglage ou d'éventuelles pièces de rechange. Votre ophtalmologiste local peut également être en mesure de vous aider à effectuer de petits ajustements ou à serrer des vis. NE PAS modifier vos lunettes, ni les bricoler.

Allergies

ExamVision utilise exclusivement des verres de haute qualité, testés pour leurs propriétés anti-allergènes. Vos lunettes doivent être réglées de manière à ce que seuls les soutiens nasaux et les embouts de branches soient en contact avec la peau. Dans le cas très improbable d'une irritation, contactez votre revendeur ExamVision.

Entretien et nettoyage

N'utilisez PAS d'alcool pour le nettoyage. Utilisez uniquement les produits de nettoyage et de désinfection sans alcool recommandés par ExamVision, et un chiffon doux non pelucheux. N'utilisez PAS d'autoclave ou de méthodes de nettoyage par ultrasons. N'utilisez PAS de méthodes de désinfection par immersion d'UV.



Tenir à l'écart de la lumière du soleil

Ne laissez pas vos loupes sous la lumière directe du soleil. Le grossissement apporté par les télescopes peut créer un "point chaud" qui pourrait provoquer un incendie.



Maintenir au sec



Fragile - Manipuler avec précautions



Ne pas les utiliser si leur emballage est détérioré



 facebook.com/ExamVisionDK

 instagram.com/examvision/

 linkedin.com/company/examvision-aps

www.examvision.com