

EXAMVISION™



Gratulálunk egyedi
készítésű lencséjéhez



Tartalom

Bevezetés.....	3
Minőségellenőrzés, finombeállítás és videók	
Galilean HD és Essential.....	4
Kepler Kompakt	6
Kepler Advanced	8
Garancia.....	10
ExamVision lencse tartozékok.....	11
Szimbólumok és használati utasítások	14



Bevezetés

Ön egy kiváló minőségű precíziós szerszámot választott, amelyet az Ön méreteihez igazítottak. Ha a lencsét be kell állítani, ne feledje, hogy ez egy összetett precíziós műszer, ezért gondosan kövesse a videó útmutatásait - vagy kérje a helyi ExamVision kereskedő segítségét.

Az ExamVision be tudja állítani a lencse munkatávolságát, és aktualizálni a lencsétet, ha látása idővel megváltozik. Ha bármilyen kérdése vagy aggálya van, kérjük, forduljon az ExamVision kereskedőjéhez.

A lencsét gondosan készítettük el, pontosan az Ön igényei szerint, és reméljük, hogy 100%-ban elégedett lesz vele.




Minőségellenőrzés, finombeállítás és videók



Galilean HD és Essential

Mielőtt elkezdené használni új lencséjét, kérjük, tekintse meg az ExamVision videókat a helyes illeszkedés és látás biztosítása érdekében. A lencsét a szemétől a tárgyig tartó kívánt munkatávolságra állítottuk be. Ez a távolság a lencséhez mellékelt minőségi kártyán van feltüntetve.

Tekintse meg videóinkat „*Does your loupe fit correctly?*” az optimális tiszta látás, a kényelem és a tökéletes illeszkedés érdekében. Ez biztosítja a lencse megfelelő magasságát és szögét, ahogy az alábbi ábrán látható:

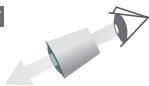

Videók

Az ExamVision videókat megtalálja a YouTube és a Vimeo csatornánkon. Ha szeretné megnézni most, szkennelje be a QR-kódot:






Minőségellenőrzés, finombeállítás és videók



Kepler Kompakt

Mielőtt elkezdené használni új lencséjét, kérjük, tekintse meg az ExamVision videókat a helyes illeszkedés és látás biztosítása érdekében. A lencsét a szemétől a tárgyig tartó kívánt munkatávolságra állítottuk be. Ez a távolság a lencséhez mellékelt minőségi kártyán van feltüntetve.

A Kepler Kompakt finomfókuszát egyszerre csak egy szemmel, a munkatávolságon belül állítsa be. A mellékelt imbuszkulcs segítségével rögzítse az optimális fókuszbeállítást. Tekintse meg videónkat **„Fitting your Kepler Kompakt loupe”** az optimális tiszta látás, a kényelem és a tökéletes illeszkedés érdekében. Ez biztosítja a lencse megfelelő magasságát és szögét, ahogy az alábbi ábrán látható:

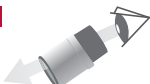

Videók

Az ExamVision videókat megtalálja a YouTube és a Vimeo csatornánkon. Ha szeretné megnézni most, szkennelje be a QR-kódot:





Minőségellenőrzés, finombeállítás és videók



Kepler Advanced

Mielőtt elkezdené használni új lencséjét, kérjük, tekintse meg az ExamVision videókat a helyes illeszkedés és látás biztosítása érdekében. A lencsét a szemétől a tárgyig tartó kívánt munkatávolságra állítottuk be. Ez a távolság a lencséhez mellékelt minőségi kártyán van feltüntetve.

A Kepler Advanced finomfókuszát egyszerre csak egy szemmel, a munkatávolságon belül állítsa be. Tekintse meg videónkat *„Fitting your Kepler Advanced loupe”* az optimális tiszta látás a kényelem és a tökéletes illeszkedés érdekében. Ez biztosítja a lencse megfelelő magasságát és szögét, ahogy az alábbi ábrán látható:



Videók

Az ExamVision videókat megtalálja a YouTube és a Vimeo csatornánkon. Ha szeretné megnézni most, szkennelje be a QR-kódot:



Garancia

5 év gyártói garancia

- Galilean HD
- Kepler Kompakt
- Kepler Advanced
- Essential

Felhívjuk figyelmét, hogy garanciánk nem terjed ki a normál elhasználódás, helytelen használat, gondatlanság, véletlen károk, módosítás, nem eredeti csomagolásban történő szállítás, illetve nem megfelelő felszerelés, karbantartás, szervizelés vagy tisztítási eljárások miatt keletkező hibákra.

Meghibásodás esetén kérjük, küldje vissza javítás céljából a készüléket az ExamVision márkakereskedőjének.

Kérjük, látogasson el az: examvision.com/warranty



ExamVision lencse tartozékok



Orrpapucsok

Átlátszó szilikon orrpapucsok különböző méretekben.



Nyaki kábel

Lágy, mégis tartós kábel az extra biztonságért a lencsék viselésékor - szilikon rögzítéssel.



Kábelrögzítők

Csatlakoztassa a kábelrögzítőket a lencsetámaszhoz, és óvatosan nyomja a LED-kábelt a klipszbe.



Tisztítóoldat (alkoholmentes)

Egyedi tisztító megoldásunk tökéletes állapotban tartja a lencsét. Vigyen fel egy kis mennyiséget egy mikroszálas lencse törülőkendőre, hogy biztonságosan eltávolítsa a szennyeződések, port és zsírt.

ExamVision lencse tartozékok



Fertőtlenítő kendők (alkoholmentes)

Fertőtlenítő kendőink tökéletes állapotban tartják a lencsét. Ezek az eldobható tisztítókendők gyors és egyszerű módjai a szennyeződés, por és zsír biztonságos eltávolításának.



Visionshield (L, XL és MAX méret)

Megvédi a lencsét és az arcát a fröccsenő szennyeződésektől. Könnyen rögzíthető az ExamVision lencséhez egy tépőzáras adapter segítségével. Az L méret a Galilei HD és Essential lencsékhez - az XL méret pedig a Kepler lencsékhez való. Ezeknél a változatoknál az arcvédőn van egy kivágás a fejlámpa számára.

A Visionshield MAX egy teljes arcvédő, amely a munkafolyamat részeként könnyen rögzíthető és illeszkedik bármely ExamVision lencséhez.

Az ExamVision Visionshieldek nem repedező, rugalmas műanyag fóliából készülnek, amely könnyen tisztítható, fertőtleníthető és újrafelhasználható.



Oldalpajzsok

A szinte láthatatlan, pehelykönnyű oldalpajzsok védik a szemet a fröccsenésektől és a törmelékektől. Eldobható, három párból álló csomagban.



Ékszerek

Ha a teljes testreszabás nem elegendő, miért is ne adhatna hozzá egy gyémántot? Egy dán ékszertervező által kézzel készített 0,02 karátos (1,7 mm) gyémánt egy sterling ezüst foglalatba kerül, amely kiemeli a gyönyörű Icon-keretet. Rubin és zafír is kapható. Tökéletesítjük. Személyre szabjuk.



Színes homloktámaszok

Antiallergén homloktámaszok a személyre szabhatóság és a kényelmes illeszkedés érdekében. Mesterséges gumiból készült.

Széles színválasztékban kapható.

Az elérhető tartozékok teljes listáját megtekintese a:
examvision.com/loupes-lights/accessories/



Szimbólumok és használati utasítások



Gyártó

ExamVision ApS. Industrivej 11, 8305 Samsø. Dánia.
www.examvision.com



eRFU Indicator

Olvassa el a használati utasítást

Az egyéb nyelvű digitális verzióért kérjük, látogasson el az alábbi linkre:
examvision.com/support



Vigyázat! Helyes használat és karbantartás

Az ExamVision lencse egy precíziós műszer. Mint minden minőségi termék esetében, a megfelelő ápolásra is szükség van ahhoz, hogy a lencse a legjobb állapotban maradjon. Normál napi használat mellett a lencse időről időre szervizelésre szorul. Rendszeresen ellenőrizze. Ha kopást vagy sérülést észlel, illetve ha a lencse kilazult vagy nem illeszkedik olyan jól, mint új korában, ne használja tovább, és azonnal forduljon az ExamVision márkakereskedőjéhez szervizelésért és cserealkatrészekért. Egy helyi szemész szakember is segíthet Önnek a kisebb kiigazításokban vagy a csavarok meghúzásában. NE módosítsa vagy változtassa meg a lencsét.

Allergiák

Az ExamVision kizárólag kiváló minőségű, allergiára tesztelt szemüvegyanyagokat használ. A lencsét úgy kell felszerelni, hogy csak az orrpapucs és a homloktámasz érjen a bőréhez. Abban a nagyon valószínűtlen esetben, ha irritációt tapasztal forduljon az ExamVision kereskedőjéhez.

Ápolás és tisztítás

NE használjon alkoholt a tisztításhoz. Csak az ExamVision által ajánlott alkoholmentes tisztító- és fertőtlenítőszerket és puha, szőszmentes ruhát használjon. NEM szabad autoklávot vagy ultrahangos tisztítási módszereket használni. NE használjon UV fény alapú fertőtlenítő módszereket.



Tartsa távol a napfénytől

Ne tegye ki a lencsét közvetlen napfénynek. A nagyítás miatt a lencse egy „forró pontot” hozhat létre, ami tüzet okozhat.



Tartsa szárazon



Törékeny, óvatosan kezelje



Ne használja, ha a csomagolás sérült



 facebook.com/ExamVisionDK

 instagram.com/examvision/

 linkedin.com/company/examvision-aps

www.examvision.com